




**Medtronic**

# Sistema StealthStation® S7®

*Centro de Información en el Quirófano*

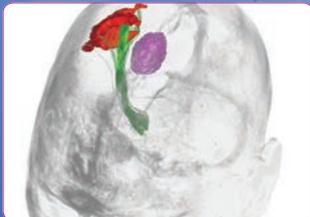

# Sistema StealthStation® S7®



## INFORMACIÓN CORRECTA, EN EL MOMENTO CORRECTO

En el quirófano la información es vital, y el Sistema StealthStation® S7® está construido para poner en el lugar y en el momento correctos las imágenes intraoperatorias y la información de navegación quirúrgica que usted necesita.

- **En General.** El Sistema StealthStation® S7® viene de manera estándar con un monitor de pantalla ancha de alta resolución de 24 pulgadas (61 cm). Monitor de pantalla táctil disponible de manera opcional.
- **Socio de Imágenes Intraoperatorias.** El sistema tiene la capacidad de interactuar con el sistema de imágenes 3D y fluoroscopia 2D O-arm® de Medtronic, así como con sistemas iMRI, iCT y arcos en C.
- **Opciones de Rastreo.** El nuevo diseño compacto aloja ambas tecnologías de rastreo de Medtronic: navegación óptica y nuestro único sistema electromagnético AxiEM™, que le proporciona la opción de navegar cada procedimiento en la forma que prefiera.
- **Fácil Acceso a Exámenes Preoperatorios.** Con consulta/recuperación DICOM, usted puede buscar, ver y descargar directamente exámenes de los pacientes a través de la red hospitalaria.

### Especificaciones del Sistema StealthStation® S7®

- Dimensiones del carrito del monitor del cirujano (en el punto más ancho): 23.75" x 24.86" (60.3 cm x 63.1 cm)
- Dimensiones del carrito del personal (en el punto más ancho): 23.01" x 23.84" (58.4 cm X 60.5 cm)
- Tamaño del monitor del cirujano: pantalla ancha de 24" (61 cm)
- Resolución del monitor del cirujano: 1920 x 1200, 60 Hz
- Opción del monitor del cirujano: Equipado con o sin interfaz de pantalla táctil
- Monitor y espacio de trabajo dedicado al personal
- Tamaño del monitor del personal: pantalla ancha de 15.4" (39.1 cm)
- Resolución del monitor del personal: 1440 x 900, 60 Hz
- Máxima altura de la cámara: 94.5" (240 cm)
- Máximo alcance de la cámara: 49.2" (125 cm)
- Compatible con AxiEM™-opción electromagnética única en la industria para neuronavegación
- Compatible con el Sistema O-arm® y sistema de imágenes intraoperatorias
- Integración de interfaz de microscopio con la mayoría de los fabricantes
- Query/Retrieve DICOM
- Transferencia de exámenes de la memoria USB o CD/DVD al Sistema StealthStation® S7®
- Sistema de audio parlantes MP3 de alta fidelidad (reproductor MP3 no incluido)

## FLUJO DE TRABAJO MEJORADO

Los quirófanos son un ambiente de trabajo dinámico donde cada persona juega un papel clave para proporcionar cuidados al paciente. Es por esto que cada detalle del sistema StealthStation® fue cuidadosamente considerado. Usted merece una experiencia amigable en cuanto a la instalación, navegación, cierre y transporte.

- **Diseño inteligente de 2 carritos.** El carrito del monitor del cirujano se desacopla con una mano y cuenta con un brazo de resorte para una colocación óptima del monitor de pantalla ancha alrededor del equipo de personal quirúrgico.
- **Diseño compacto.** El tamaño reducido de este nuevo sistema StealthStation® S7® AxiEM™ facilita su ajuste y maniobras dentro del quirófano.
- **Música MP3 Lista.** Hemos equipado el Sistema StealthStation® S7® con sonido de alta fidelidad para hacer el ambiente de su quirófano más agradable.
- **Atención a los Detalles.** La consideración meticulosa de cada detalle ayuda a que el Sistema StealthStation® S7® sea de fácil manejo:
  - El Sistema StealthStation® S7® funciona en posición empotrada o desempotrada.
  - El sistema de rastreo AxiEM™ puede emplearse desde su ubicación discreta en el Sistema StealthStation® S7® o levantarse fácilmente y colocarse en el barandal de la mesa del quirófano.
  - El mango más largo y el botón láser de la cámara facilitan su orientación para la navegación desde cualquier posición.
  - El sistema StealthStation® S7® incluye un cajón, un contenedor, y soportes para cables que facilitan la organización del material, aprovechando el espacio y facilitando la limpieza.
  - El sistema cuenta con una unidad de energía ininterrumpida que permite desconectar y mover el Sistema StealthStation® S7® sin perder datos.

### Medtronic Navigation, Inc.

826 Coal Creek Circle, Louisville, CO 80027 USA  
Toll Free: 877-242-9504 | Telephone: 720-890-3200  
Fax: 720-890-3500

### Medtronic en México

Paseo de la Reforma No.222 Piso 15, 1500A y 1500B  
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600  
Teléfono: (01 55) 1102 9030 | Fax: (01 55) 5525 2560