


EL MULTIDEBRIDADOR

Eficacia y elección

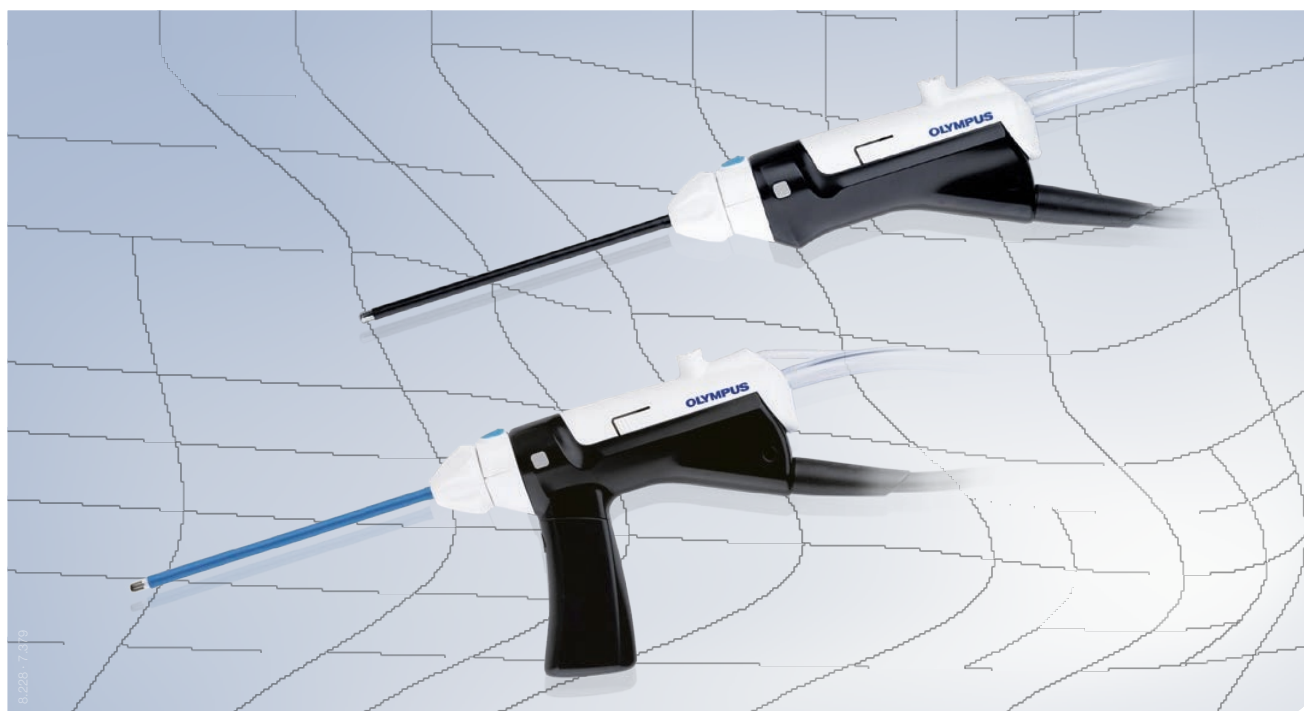

EL MULTIDEBRIDADOR DIEGO ELITE OFRECE VARIAS OPCIONES QUIRÚRGICAS:

Cuchillas estándar

- Las cuchillas tipo A permiten una mejor disección.
- La succión distal mejora la visualización debido a un menor número de obstrucciones y cambios de accesorios.


Cuchillas rotatorias

La rotación de 360° de la ventana de corte de la cuchilla permite una disección del tejido más eficiente para los casos de senos frontal y maxilar.




Cuchillas bipolares

- Mejor resultado de coagulación que el PK diego.
- Tiempo de quirófano muy inferior en comparación con las cuchillas estándar.
- Disponibles cuchillas para senos, cornetes, amígdalas y adenoides.

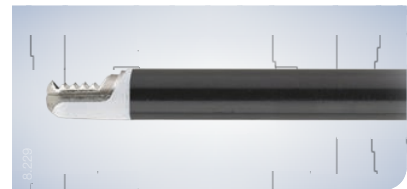

Cuchillas monopolares

- Coagulación Monopolar controlada por un interruptor al alcance de tu dedo, es una opción para mejorar el control del sangrado.
- Resultado monopolar equivalente a generadores de quirófano estándar.
- Disponibles cuchillas para senos, amígdalas y adenoides.

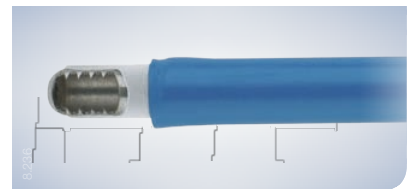


DIEGO ELITE permite eliminar¹ tejido un 27% más rápido que Diego

- Obstrucción mínima
- Reducción de cambios de accesorios
- Mejor disección de tejidos



Tiempo de procedimiento un 12% más rápido con el uso de cuchilla bipolar²

- Tiempo de quirófano muy inferior
- Más rentable
- Tiempos de procedimiento más rápidos

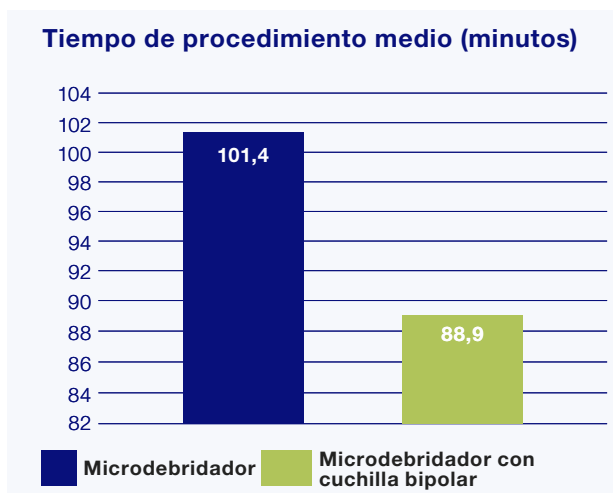

¹ Datos en archivo

² Sindwani, R, Kumar, N. Bipolar microdebrider may reduce intraoperative blood loss and operating time during nasal polyp surgery. Ear Nose Throat Journal. 2012 Aug.; 91(8):336-44.

MAYOR EFICACIA


MULTIDEBRIDADOR

- Dos mangos ergonómicos
- Se adapta a las preferencias individuales del cirujano




Vía de succión desechable

- El material biológico pasa directamente de la cuchilla al set de tubos desechables.
- La succión directa optimiza la disección de tejidos.

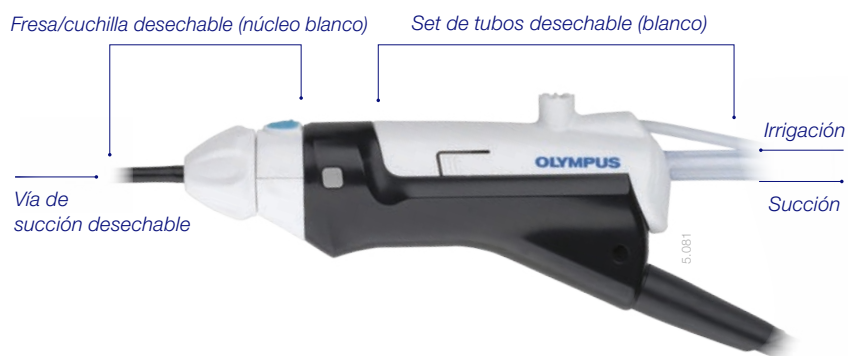

Desobstrucción

- Desobstrucción en un solo paso
- Desobstrucción más rápida
- Ahorra tiempo y esfuerzo
- Procedimiento más rápido

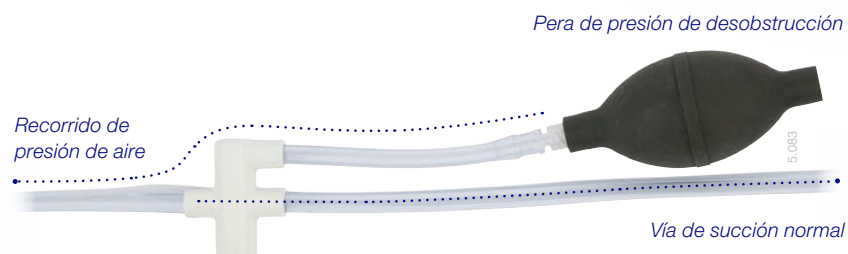

Succión específica

- Succión específica de gran potencia
- Mayor rendimiento gracias a mejores resultados de succión
- La succión avanzada reduce las obstrucciones




ID de cuchilla

- Reconocimiento automático de cuchilla
- Valores predeterminados según los ajustes recomendados
- Instalación fácil e intuitiva



Activación desde el pedal

- Abertura o cierre total del orificio de la cuchilla en un solo paso
- Eficacia mejorada

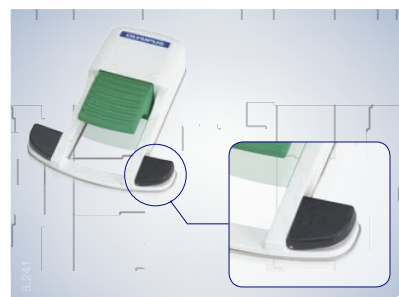

CUCHILLAS Y FRESAS

Cuchillas para senos, rectas

Estándar



Tipo A  4 mm  4,8 mm

EGSB4000SA


Cuchilla de corte, 4 mm, recta, estándar, tipo A, 5/paquete

EGSB4800SA

Cuchilla de corte, 4,8 mm, recta, estándar, tipo A, 5/paquete



8,240

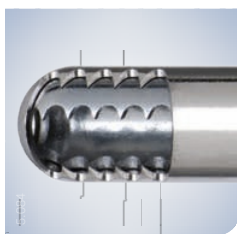

Dentada  2,9 mm  4 mm

EGSB2900SS

Cuchilla de corte, 2,9 mm, recta, dentada, succión distal, 5/paquete


EGSB4000SS

Cuchilla de corte, 4 mm, recta, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete



5,084

Bipolar

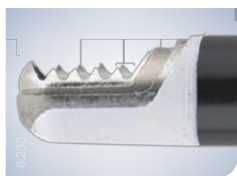

Dentada  4 mm


EGBB4000SS

Cuchilla bipolar, 4 mm, recta, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete



8,233

Monopolar

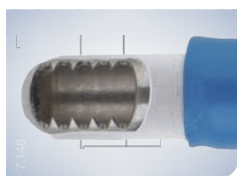

Dentada  4 mm

EGMB4000SS

Cuchilla monopolar, 4 mm, recta, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete



7,148

Forma del extremo distal: recta
Forma del extremo: dentada con succión distal

CUCHILLAS Y FRESAS

Cuchillas para senos, curvadas


Estándar



15°  4 mm

EGSB4015SS

Cuchilla de corte, 4 mm, 15°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete

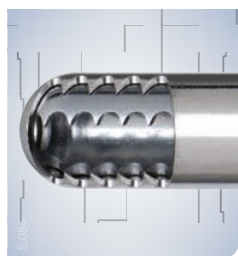

40°  2,9 mm  4 mm

EGSB2940SS

Cuchilla de corte, 2,9 mm, 40°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete

EGSB4040SS

Cuchilla de corte, 4 mm, 40°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete

EGSB4040RS

Cuchilla de corte, 4 mm, 40°, rotatoria, dentada, DS, 5/paquete. 



60°  4 mm

EGSB4060SS

Cuchilla de corte, 4 mm, 60°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete

EGSB4060RS

Cuchilla de corte, 4 mm, 60°, rotatoria, dentada, DS, 5/paquete. 



75°  2,9 mm

EGSB2975SS

Cuchilla de corte, 2,9 mm, 75°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete




90°  4 mm

EGSB4090RS

Cuchilla de corte, 4 mm, 90°, rotatoria, dentada, DS, 5/paquete. 



Bipolar

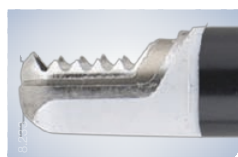

40°  4 mm

EGBB4040SS

Cuchilla bipolar, 4 mm, 40°, estándar, dentada, succión distal, 5/paquete



CUCHILLAS Y FRESAS

Cuchillas para cornetes

Estándar, recta



Cornete ○ 2 mm

EGSB2000SA

Cuchilla de corte, 2 mm, recta, estándar, tipo A, 5/paquete

5.095



Bipolar, recta



Cornete ○ 2 mm

EGBB2000SA

Cuchilla bipolar, 2 mm, recta, estándar, tipo A, resección submucosa, 5/paquete

8.237



Fresas



Fresa punta diamantada ○ 3 mm

EGBUR3015DB

Fresa, 3 mm, 15 cm, 15°, punta diamantada, 5/paquete

EGBUR3070DB

Fresa, 3 mm, 13,5 cm, 70°, punta diamantada, 5/paquete

5.101



Fresa cónica diamantada ○ 4 mm


EGBUR4015DT

Fresa, 4 mm, 15 cm, 15°, cónica diamantada, 5/paquete

EGBUR4070DT

Fresa, 4 mm, 13,5 cm, 70°, cónica diamantada, 5/paquete

5.101

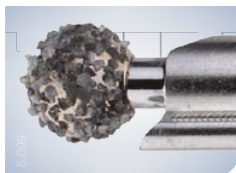

Fresa bola diamantada ○ 4,5 mm

EGBUR4515BB

Fresa, 4,5 mm, 13,5 cm, 15°, fresa bola, 5/paquete

5.102



Fresa cilíndrica estriada ○ 4,2 mm

EGBUR4215FB

Fresa, 4,2 mm, 13,5 cm, 15°, cilíndrica estriada, 5/paquete


5.102



CUCHILLAS Y FRESAS

Cuchillas para amígdalas y adenoides

Estándar, angulable

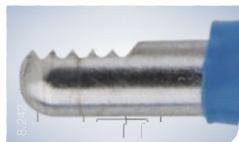

Amígdalas y adenoides ○ 4 mm

EGMS4000SS

Cuchilla angulable, 4 mm, 0°–40°, dentada, T/A, succión distal, 5/paquete.



Orientación de abertura convexa

Bipolar, curvada



Amígdalas y adenoides ○ 4 mm


EGBB4040XS

Cuchilla bipolar, 4 mm, 40°, convexa, dentada, succión distal, 5/paquete



Orientación de abertura convexa

Monopolar, angulable

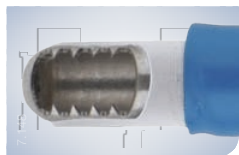

Amígdalas y adenoides ○ 4 mm

EGMM4000SS

Cuchilla monopolar angulable, 4 mm, 0°–40°, dentada, T/A, succión distal, 5/paquete



Orientación de abertura convexa

Cuchillas para laringe

Superficial



○ 2,9 mm

EGLB2922SS

Cuchilla para laringe, 2,9 mm, 22 cm, estándar, superficial, 5/paquete

EGLB2927SS

Cuchilla para laringe, 2,9 mm, 27 cm, estándar, superficial, 5/paquete



*Forma del extremo distal:
geometría doble angulación, 18°
Forma del extremo: lisa*

De volumen



○ 4 mm

EGLB4022SD

Cuchilla para laringe, 4,0 mm, 22 cm, estándar, citoreducción, 5/paquete

EGLB4027SD


Cuchilla para laringe, 4,0 mm, 27 cm, estándar, citoreducción, 5/paquete



*Forma del extremo distal:
geometría doble angulación, 18°
Forma del extremo: lisa-dentada*

MULTIDEBRIDADOR

Diagrama de compatibilidad del sistema

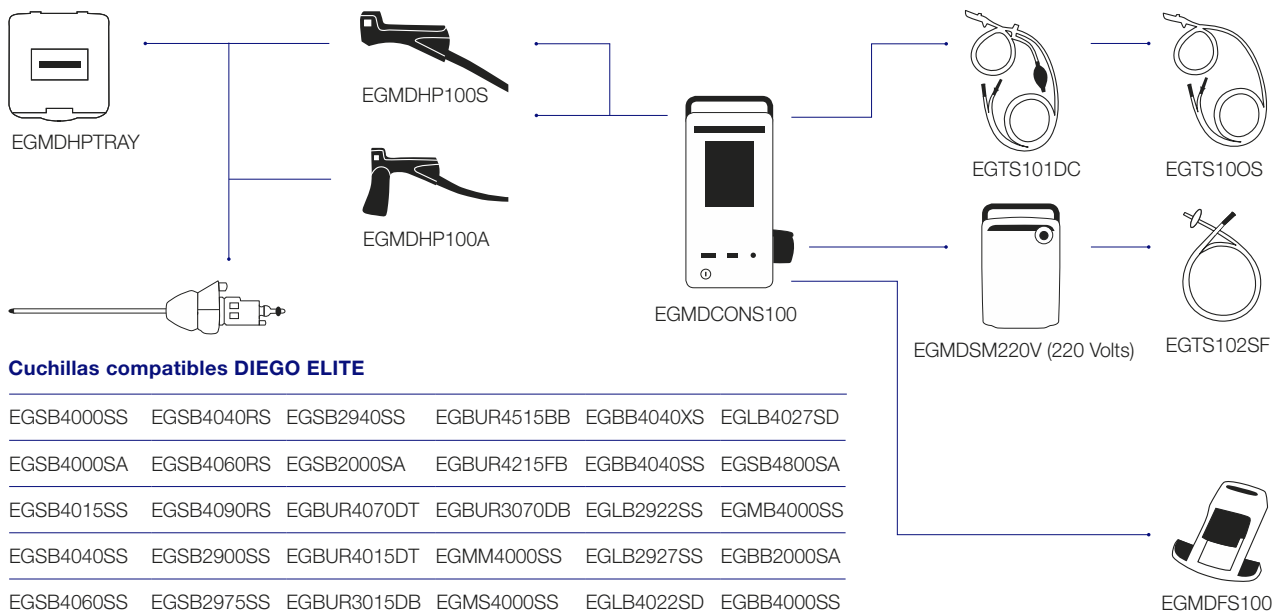

Sistema DIEGO ELITE

Referencia	Descripción
EGMDCONS100	Consola
EGMDFS100	Pedal
EGMDHP100A	Mango del MULTIDEBRIDADOR, angulado
EGMDHP100S	Mango del MULTIDEBRIDADOR, recto
EGMDHPTRAY	Bandeja del mango del MULTIDEBRIDADOR
EGMDSM220V	Módulo de succión: 220 V

Accesorios de DIEGO ELITE

Referencia	Descripción
EGTS100S	Set de tubos de MULTIDEBRIDADOR, estándar, 5/paquete
EGTS101DC	Set de tubos de MULTIDEBRIDADOR, desobstrucción, 5/paquete
EGTS102SF	Set de tubos del módulo de succión, succión/filtro, 5/paquete



Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante

OLYMPUS

OLYMPUS IBERIA S.A.U.
Plaza Europa 31, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España
Tel.: +34 9 02 44 47 04
Fax: +34 9 32 00 95 80
E-mail: oes.marketingendo@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390
Miami FL 33126-2087, USA
Tel.: +1 305 260 4244
Fax: +1 305 266 9168
E-mail: cirugia@olympus.com
www.olympusamericalatina.com